

设计理念： 以人为本，自主创新

质量理念： 持续改进，追求卓越

服务理念： 专业优质，用户满意



Bondent
博恩登特

博恩口腔集团

全国统一服务热线：400-030-5689

地址：上海嘉定新城封周路655号希望商务大楼13F

网址：www.bondent.com

Gomesin
博美星

四川博美星口腔设备有限公司

地址：四川省资阳市雁江区现代大道3号

服务热线：028-26397268

Gomesin 博美星
- 让看牙变得轻松又舒适



E200

品质 品位。

简约之美 不凡设计

简而不凡 可靠稳定

E200牙科综合治疗机外观简约、操控方便、安全可靠、性能稳定，是专业口腔医院、牙科门诊实用的高性价比治疗设备

Ode to Simplicity



E200 设计风格

轻· 简· 稳·

轻·
轻松自如

精准的设计，精良的制作，让所有关节转点，转动轻盈、灵活、停放稳定；便于您以舒适自然的姿势进行操作；让您的操作得心应手，轻松自如；

简·
简而不凡

简约流畅的外观设计、小巧的侧箱、合理的空间布局、巧妙的外形搭配，尽显简约、大方之美。标准化接口可轻松地集成洁牙机、光固化机、显微镜、数字化影像等辅助设备，让E200治疗机处处彰显不凡。

稳·
稳如磐石

优化的结构设计，让整机运行时稳如磐石；可靠的组件、精湛的工艺，进口的核心零部件，让E200治疗机质量更加稳定可靠。



设计理念 以人为本

Design Concept

为医师提供舒适的治疗姿态，事半功倍的工作效率；

为助手提供充裕的操作空间，有效的工作支持；

为患者提供舒适的就诊体验。

更舒适的治疗环境

- 超薄靠背垫，靠背上部缩窄设计，使得医生能够从容贴近患者，获取更舒适的工作位置；
- 空间几何学的应用，结合小巧的机箱、器械盘，让E200拥有更佳的空间感，为医师、护士提供良好的观察视角及操作空间。

更安全便捷的操作模式

- 器械臂操作轻松、灵活，轻拉到位，停放稳定；
- 可靠的感应触摸按键，多键复合联动，双主控、四点控制设计，使手术中的操作得心应手；
- 超短强弱吸管路设计，使助手操作更轻松更便捷；
- 外置超大过滤网设计，更有效保证吸力，便于清洁保养。

更舒适的就诊体验

- 人机工程学座椅，让患者腰部得到有效支撑的同时，获得更强的包裹感；
- 靠背高支点转点设计，让靠背转动点更加接近人体髋关节转点，减少靠背转动时带来的推、搓背感，让患者在靠背俯仰的时候感觉更加舒适。

更贴心的辅助环境

- 更大的助手辅助操作空间，便于助手协助医师进行四手操作；
- 组合式纸杯、纸巾盒设计，方便患者、护士抽拿纸巾、纸杯。



优化的牙椅结构设计

牙椅升降高度范围大

- 最低椅位：370毫米
- 最高椅位：800毫米
- 对于医师而言，大的高度调节范围，可保证更多体态的医师找到更为舒适的工作位置；
- 对于患者而言，370毫米的超低椅位，既能为医师提供更好的观察和治疗角度，又可方便患者上下座椅，特别对于老人、小孩及行动不便的患者尤为重要。

符合人体工程学的舒适感

- 结合人体数据分析,三维建模设计的牙椅座垫,为患者提供充实的包裹感;
- 贴合人体髋关节运动的靠背俯仰轨迹,降低推、搓背感,提高患者的舒适体验。



双关节头枕

按压式双关节头枕，操作简单方便，单手操作可调节适合不同身高甚至儿童的就诊；也可以随患者的头一起移动，随心所欲调至您满意的头枕角度；便于您的观察与操作。符合人机学的头枕设计，固定头部的同时对后颈部起到支持作用，让患者更加舒适、放松。



旋转扶手设计

方便患者上下椅位



低压安全电机

低压静音直流电机，运行平稳，质保3年，让您安心使用。

多种照明方式的选择

多个可供选购的 LED 口腔灯可让您根据自己的诊疗需求，选择最适合您的口腔灯。



LED-AZS型口腔灯 (E200B标配)

- * 可感应/触摸控制灯的开、关及色温、照度调节；
- * 照度调节范围7000-56000lx；
- * 色温调节范围4000K-5500K(7档)；
- * 数字显示色温照度；
- * 把手可取下进行消毒；
- * 可加装摄像系统；
- * 显色指数Ra > 90。



LED-ZZ02型口腔灯 (选配)

- * 触摸控制灯的开、关及色温、照度调节
- * 照度调节范围10000-120000lx
- * 色温调节范围4000K-5500K(7档)
- * 无影效果佳
- * 数字显示色温照度
- * 把手可取下进行消毒
- * 可加装摄像系统
- * 显色指数Ra > 90



LED-FSM型口腔灯 (选配)

- * 可感应/触摸控制口腔灯的开/关及照度调节
- * 照度调节范围7000-32000lx
- * 具有高色温 (5500k)、低色温 (4000k) 和蓝光阻断功能 (防止树脂材料固化)
- * 把手可取下进行消毒
- * 铝合金骨架
- * 显色指数Ra > 92



LED-FSH型口腔灯(E200A/C标配)

- * 可感应/触碰控制灯的开、关及照度调节
- * 照度调节范围7000-32000lx
- * 具有蓝光截止功能(防止树脂固化)
- * 把手可取下进行消毒



友好的人机界面

双主控四点位控制；
平面感应式触摸按键；
冲盂/漱口时间可调节并显示；
漱口水水温可调节并显示；
三组九个记忆椅位及急救位，吐痰位，复位；
控制系统自检故障并显示；
灯、椅、冲盂多功能联动设置；
机椅互锁。



旋转痰盂

150° 旋转，可旋转至患者吐痰位置；
痰盂易拆卸，易消毒；
痰盂表面高温图层，坚硬、光滑，耐磨损、抗划伤；



双关节助手

大的转动范围与小巧的箱体给护士留出了充足的操作空间，便于四手操作的展开；
双关节带阻尼可调，转动灵活轻便，便于护士轻松定位；



吸唾过滤器

- 位于助手架侧方更换、清洁更加方便；
- 助手架侧方引出的强弱吸管路，使强弱吸管路更短，在进行吸唾操作时，减轻因管路重力给护士和患者带来的不适感。



高分子材料箱体

箱体设计小巧简洁，充分利用诊室空间；
特殊高分子材料高压成型，坚固耐用 永不变色。



专利设计纸巾盒

转动灵活，拿取纸巾至最后一张仍然方便顺畅。
空间位置的布局充分考虑了护士、医师、病人三者间的协调关系，即方便患者使用，又不会影响医师护士工作；
扁平的上端盖设计，可做储物台使用。



上挂式 (选配)

下挂式 (E200A/C标配)

下挂式 (E200B标配)

个性化设计

使您的操作得心应手、诊室与众不同



圆形脚踏开关
(E200A/C标配)



多功能组合脚踏开关
(E200B/种植椅标配)



A型医师椅
(E200A标配)



B型医师椅
(E200B/ C标配)



C型医师椅
(选配)



护士椅
(选配)

选配种植灯进行种植治疗

无限拓展 开辟未来



选配显微镜进行显微治疗



Infinite Expansion

多种款式的设计

您可以根据自己的喜好，随意挑选您满意的机型

满足您的不同需求 Various styles



E200A



E200B



E200C



橘红色 8068-16
E200A标配



深蓝色 8068-7
E200B标配



苹果绿色 8068-3
E200C标配



湖蓝色 8068-15
选配






红色 8068-17
选配




象牙白 8602
超纤皮



红色 8607
超纤皮

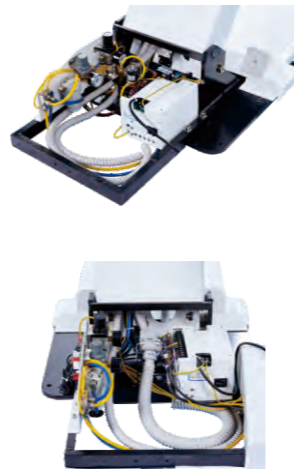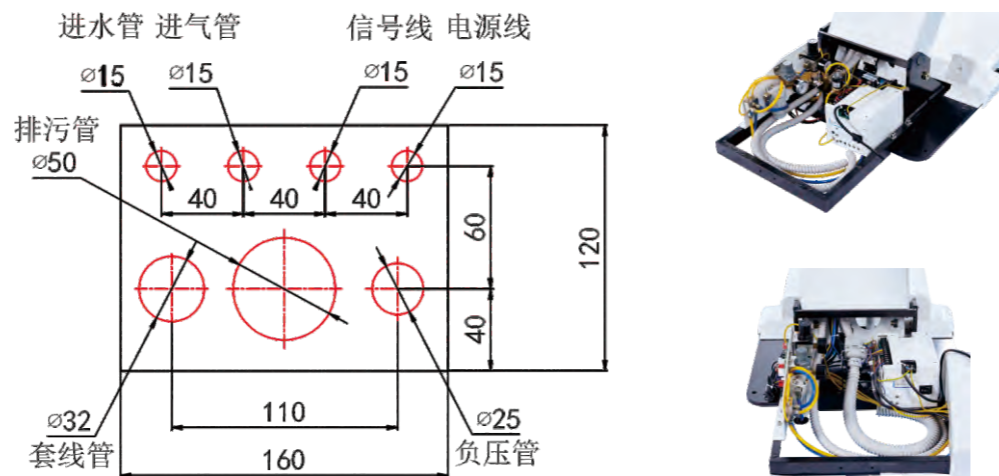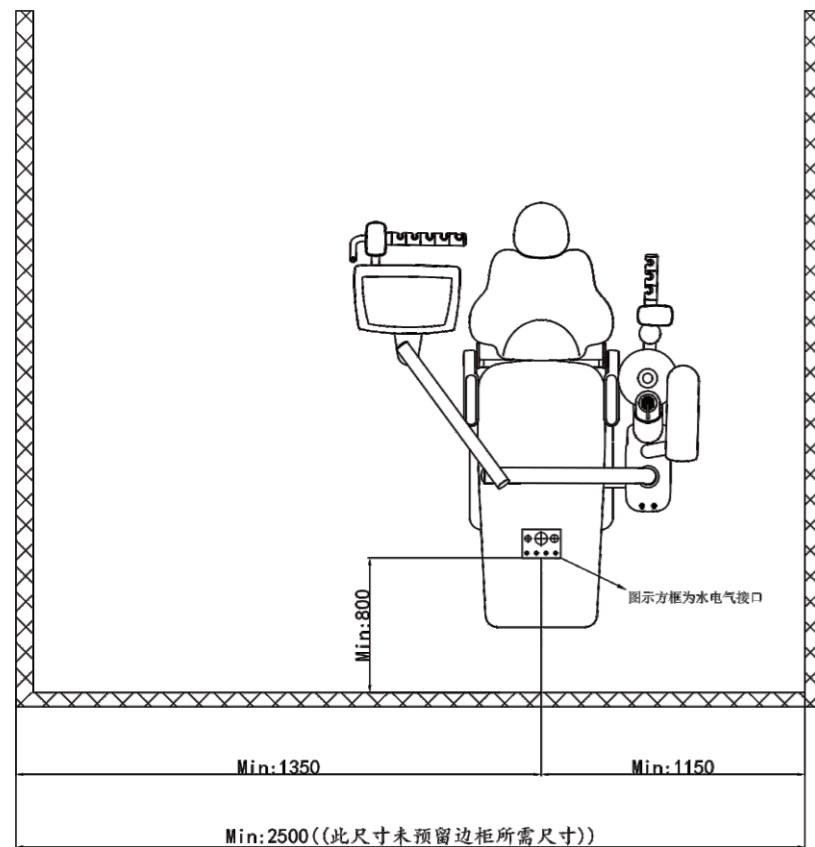

水电气接口高度(单位: MM)

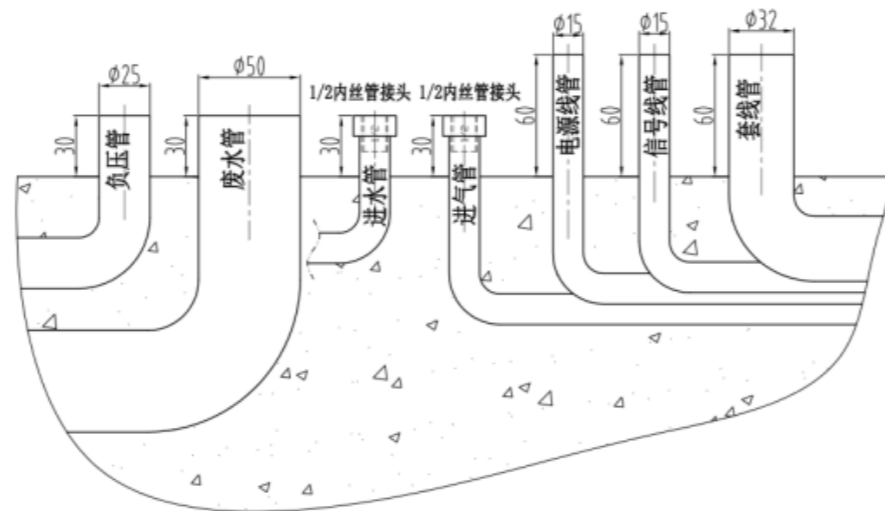

技术参数

传送方式	下挂式
电压要求	100VAC, 115VAC, 220-240VAC
电源频率	50/60Hz
进水压力	200-400Kpa
进气压力	550-800Kpa
重量	180Kg
安装方式	地面安装
颜色	白色 (RAL9016)

